

Clearblue® DIGITAL

ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Τεστ εγκυμοσύνης

- Εάν χρησιμοποιήσετε το τεστ από την αναμενόμενη ημέρα έναρξης της περιόδου σας, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας για να μάθετε εάν είστε έγκυος.
- Εάν κάνετε το τεστ πριν από την αναμενόμενη ημέρα έναρξης της περιόδου σας, χρησιμοποιήστε τα πρώτα πρωινά ούρα.
- Για ακριβές αποτέλεσμα του δείκτη σύλληψης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα πρώτα πρωινά ούρα.
- Αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση υγρών πριν από το τεστ.
- Διαβάστε αυτό το φύλλο οδηγιών προσεκτικά πριν να κάνετε το τεστ.

1 Κάντε το τεστ

Όταν είστε έτοιμη να κάνετε το τεστ, αφαιρέστε το δοκιμαστικό στικ του τεστ από το αλουμινένιο περιτύλιγμα και αφαιρέστε το γαλάζιο καπάκι. Χρησιμοποιήστε αμέσως το δοκιμαστικό στικ.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ


Κάνετε το τεστ στη ροή των ούρων σας

- Κρατήστε το απορροφητικό άκρο, με κατεύθυνση προς τα κάτω, στη ροή των ούρων σας **μόνο για 5 δευτερόλεπτα**.
- Προσέξτε να μη βρέξετε το υπόλοιπο δοκιμαστικό στικ.
- Μπορείτε να επανατοποθετήσετε το καπάκι και να αφήσετε το δοκιμαστικό στικ σε μια επίπεδη επιφάνεια.



Συλλέξτε ένα δείγμα των ούρων σας σε ένα καθαρό, στεγνό δοχείο

- Κρατήστε το απορροφητικό άκρο, με κατεύθυνση προς τα κάτω μέσα στα ούρα, όπως φαίνεται στην εικόνα, **μόνο για 20 δευτερόλεπτα**.
- Μπορείτε να επανατοποθετήσετε το καπάκι και να αφήσετε το δοκιμαστικό στικ σε μια επίπεδη επιφάνεια.

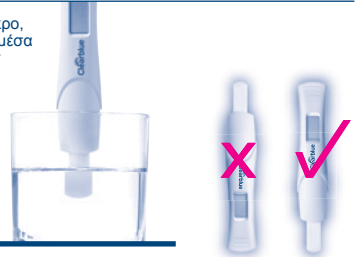

2 Περιμένετε...

- Θα εμφανιστεί αναβοσβήνοντας το σύμβολο αναμονής που υποδεικνύει ότι το τεστ λειτουργεί.
- Όταν σταματήσει να αναβοσβήνει το σύμβολο αναμονής, θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα του τεστ. Εάν το σύμβολο αναμονής δεν εμφανίζεται αφού χρησιμοποιήσετε το τεστ, **ανατρέξτε στην ερώτηση 6 στην ενότητα Ερωτήσεις και Απαντήσεις.**



Σε **καμία περίπτωση** δε θα πρέπει να κρατάτε το δοκιμαστικό στικ με το απορροφητικό άκρο προς τα πάνω, κατά τη διάρκεια του τεστ.

3 Δείτε το αποτέλεσμα

Το τεστ εγκυμοσύνης Clearblue® DIGITAL διαθέτει **δείκτη σύλληψης** που σας προσφέρει μια εκτίμηση για το πότε συλλάβατε. Η πληροφορία αυτή εμφανίζεται στην οθόνη μαζί με το αποτέλεσμα «Έγκυος».

- Μέσα σε **3 λεπτά**, εμφανίζεται το αποτέλεσμα σας στην οθόνη.
- Το αποτέλεσμα «Έγκυος» ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη πριν από το αποτέλεσμα του δείκτη σύλληψης. **Περιμένετε** μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το σύμβολο αναμονής για να δείτε το αποτέλεσμα του δείκτη σύλληψης. Αυτό μπορεί να χρειαστεί μέχρι και 3 λεπτά.
- Σε κάποιες περιπτώσεις, τα αποτελέσματα εμφανίζονται μόλις σε 1 λεπτό.
- Το αποτέλεσμα θα παραμείνει στην οθόνη για περίπου 24 ώρες.
- Εάν το αποτέλεσμα του τεστ είναι «Έγκυος», θα πρέπει να επισκεφθείτε το γιατρό σας για να σας συμβουλευτεί σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε. Ο γιατρός σας θα υπολογίσει το στάδιο της εγκυμοσύνης σας βάσει της πρώτης ημέρας της τελευταίας σας περιόδου.
- Η σύλληψη συμβαίνει περίπου 2 εβδομάδες πριν την αναμενόμενη ημέρα έναρξης της επόμενης περιόδου σας. Ο δείκτης σύλληψης προσφέρει μια εκτίμηση για το πότε συλλάβατε.

- Ο δείκτης σύλληψης είναι 93% ακριβής στο να ανιχνεύει την ημερομηνία σύλληψης. Η εκτίμηση βασίζεται στα επίπεδα της ορμόνης της εγκυμοσύνης, hCG (ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη), στα ούρα σας. Τα επίπεδα της hCG διαφέρουν από γυναίκα σε γυναίκα, και επομένως είναι πιθανόν ο δείκτης σύλληψης να δίνει ενίοτε παραπλανητικά αποτελέσματα. Η ακρίβεια του αποτελέσματος «Έγκυος» «Όχι έγκυος» είναι μεγαλύτερη από 99% όταν κάνετε το τεστ από την αναμενόμενη ημέρα έναρξης της περιόδου σας.

Σφάλματα Τεστ

Διαβάστε την ενότητα «Σφάλματα Τεστ» εάν έχετε χρησιμοποιήσει το δοκιμαστικό στικ και στην οθόνη δεν εμφανίζεται κανένα από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα.

Πώς να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα	Χρόνος από τη σύλληψη	Η διάρκεια της εγκυμοσύνης σας όπως θα την ορίσει ο γιατρός σας (βάσει ενός κύκλου 28 ημερών)*
	Το αποτέλεσμα σας είναι Όχι έγκυος ανατρέξτε στην ερώτηση 13 στις Ερωτήσεις και Απαντήσεις.	-
	Το αποτέλεσμα σας είναι Έγκυος και συλλάβατε περίπου πριν από 1-2 εβδομάδες.	3-4 εβδομάδες
	Το αποτέλεσμα σας είναι Έγκυος και συλλάβατε περίπου πριν από 2-3 εβδομάδες.	4-5 εβδομάδες
	Το αποτέλεσμα σας είναι Έγκυος και συλλάβατε πριν από περισσότερες από 3 εβδομάδες.	5+ εβδομάδες

*Ο γιατρός σας θα ορίσει τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας από την πρώτη ημέρα της τελευταίας σας περιόδου, όχι από την ημέρα που συλλάβατε.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1 Πώς λειτουργεί το τεστ εγκυμοσύνης Clearblue® DIGITAL; Όταν είστε έγκυος, ο οργανισμός σας παράγει την ορμόνη της εγκυμοσύνης hCG (ανθρώπινη χορηκική γοναδοτροπίνη). Η ποσότητα της hCG στο σώμα σας αυξάνεται κατά τα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης. Το Clearblue® μπορεί να ανιχνεύσει ακόμα και ελάχιστες ποσότητες αυτής της ορμόνης στα ούρα σας (ή εν ειδικότητα του τεστ είναι 25 mIU/ml). Βάσει των επιπέδων της hCG στα ούρα σας, ο δείκτης σύλληψης περιφέρει μια επίσημη για το πότε συλλαβάτε.

2 Πόσο ακριβής είναι το τεστ εγκυμοσύνης Clearblue® DIGITAL στην ανίχνευση της εγκυμοσύνης; Στις ερμηνείες δοκιμής το τεστ εγκυμοσύνης Clearblue® DIGITAL είναι πάνω από 99% ακριβές στο να ανιχνεύει εάν είστε έγκυος ή όχι, όταν χρησιμοποιείται από την αναμενόμενη ημέρα έναρξης της περιόδου σας. Εάν κάνετε το τεστ πριν από την αναμενόμενη έναρξη της περιόδου σας και λάβετε ένα αποτέλεσμα «Όχι Έγκυος», εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης. *Ανατρέξτε στην ερώτηση 4.*

3 Πόσο ακριβής είναι ο δείκτης σύλληψης του τεστ εγκυμοσύνης Clearblue® DIGITAL; Ο δείκτης σύλληψης είναι ο δείκτης ακριβής στο να ανιχνεύει την ημερομηνία σύλληψης. Η εκτίμηση βασίζεται στα επίπεδα της hCG στα ούρα σας. Τα επίπεδα της hCG διαφέρουν από γυναίκα σε γυναίκα, και επομένως είναι πιθανόν ο δείκτης σύλληψης να είναι ενίοτε παραπλανητικά αποτελέσματα. Ο δείκτης σύλληψης αποδείχθηκε ότι συμφωνεί κατά 97% με τη μεταγενέστερη χρονολόγηση υπερήχου (11-13 εβδομάδες). Με βάση μελέτες 187 γυναικών που συγκρίναν τα αποτελέσματα (1-2, 2-3, 3+ εβδομάδες από τη σύλληψη) με τη χρονολόγηση υπερήχου. Εάν κάνετε το τεστ πάνω από 6 εβδομάδες μετά τη σύλληψη, ο δείκτης σύλληψης μπορεί να δώσει μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα επίπεδα της hCG στα ούρα είναι πολύ υψηλά ώστε το τεστ να μην μπορεί να δώσει ακριβή εκτίμηση του χρόνου που μεσολάβησε από τη σύλληψη.

4 Πότε μπορώ να κάνω το τεστ εγκυμοσύνης Clearblue® DIGITAL; Το τεστ εγκυμοσύνης Clearblue® DIGITAL μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις 5 ημέρες πριν από την καθυστέρηση σας (δηλαδή 4 ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημέρα έναρξης της περιόδου σας). Εάν κάνετε το τεστ πριν από την αναμενόμενη έναρξη της περιόδου σας και λάβετε ένα αποτέλεσμα «Όχι Έγκυος», εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης. Δείτε το παρακάτω διάγραμμα για αποτελέσματα από κλινικές μελέτες με το τεστ εγκυμοσύνης Clearblue® DIGITAL σε δείγματα πρώιμης εγκυμοσύνης.

Πρώιμος έλεγχος				
Αριθμός ημερών πριν από την αναμενόμενη έναρξη της περιόδου	-1	-2	-3	-4
% δειγμάτων από έγκυες γυναίκες που έλαβαν αποτέλεσμα «Έγκυος»	98%	97%	90%	65%

Εάν το αποτέλεσμα σας είναι «Όχι Έγκυος» και παρατήρ. αυτά υποψιάζεσ. ακόμη κι είστε έγκυος, *ανατρέξτε στην ερώτηση 13.*

Για να βρείτε την αναμενόμενη ημέρα έναρξης της περιόδου σας, υπολογίστε τη συνηθισμένη διάρκεια του κύκλου σας μετρώντας τον αριθμό ημερών από την πρώτη ημέρα της περιόδου σας μέχρι την ημέρα πριν την επόμενη περίοδο σας.

• Εάν ο κύκλος σας είναι κανονικός, λάβετε σύμβου. το μεγαλύτερο κύκλο που είχατε τους τελευταίους μήνες πριν από το τεστ.

• Εάν δεν θυμάστε πότε να περιμένετε την επόμενη περίοδο σας, συνιστούμε να κάνετε το τεστ τουλάχιστον 19 ημέρες μετά την τελευταία φορά που είχατε ερωτική επαφή χωρίς προφυλάξεις.

5 Μπορεί κάποιο φάρμακο ή κάποια πάθηση να επηρεάσει το αποτέλεσμα του τεστ;

• Διαβράξτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή για οποιοδήποτε φάρμακο λαμβάνετε πριν από τη διεξαγωγή του τεστ.

• Τα φαρμακευτικά ενδοκρινικά γονιμοδότης που περιέχουν hCG μπορεί να οδηγήσουν σε παραπλανητικά αποτελέσματα (τα σκευάσματα αυτά χορηγούνται με ενέσιμη μορφή και η διεξαγωγή του τεστ σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη χορήγηση τους μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς αποτέλεσμα «Έγκυος»).

• Λοιπές θεραπευτικές γονιμοδότης (όπως η κτηρική κλομιφέννη), που χρησιμοποιούνται ως αντισυλληπτικά (π.χ. αντισυλληπτικό χάπι) δεν επηρεάζουν κατά κανόνα το αποτέλεσμα.

• Εάν έχετε πρόσφατα διακομί. τη χρήση ορμονικής αντισύλληψης ή χρησιμοποιείτε θεραπευτικές γονιμοδότης, όπως κτηρική κλομιφέννη, ο κύκλος σας μπορεί να παρουσιάσει ανωμαλίες, με αποτέλεσμα να κάνετε το τεστ πιο νωρίς από ό,τι θα έπρεπε.

• Εάν υπήρξε πρόσφατα έγκυος (ακόμα και αν δεν ολοκληρώθηκε η κύηση) μπορεί να λάβετε ένα ψευδώς αποτέλεσμα «Έγκυος».

• Εάν έχετε μπει ή πρόκειται να μπει. στην εμμηνορροια, μπορεί να λάβετε ένα ψευδώς αποτέλεσμα «Έγκυος» ακόμα και αν δεν είστε έγκυος.

• Μια εκτοκτική εγκυμοσύνη και οι ωοθηκικές κύστες «κίτρινης» ή «δωδεκάημερης» παραπλανητικά αποτελέσματα.

• Οι πολλαπλές και οι εκτετατές εγκυμοσύνης ενδέχεται να δώσουν παραπλανητικά αποτελέσματα του δείκτη σύλληψης.

Εάν τα αποτελέσματα του τεστ δεν είναι τα αναμενόμενα, θα πρέπει να τα συζητήσετε με το γιατρό σας.

6 Χρησιμοποίηση του τεστ, αλλά δεν εμφανίστηκε το σύμβολο αναμονής. Τι σημαίνει αυτό; Δεν ήταν σωστή η εκτέλεση του τεστ. *Ανατρέξτε στην ενότητα «Ξεθάλαμα Τεστ».*

7 Χρησιμοποίηση του τεστ, αλλά δεν εμφανίστηκε κανένα αποτέλεσμα στην οθόνη. Τι σημαίνει αυτό; Το αποτέλεσμα θα πρέπει να εμφανιστεί στην οθόνη μέσα σε 3 λεπτά. Εάν δεν εμφανιστεί κανένα αποτέλεσμα, *ανατρέξτε στην ενότητα «Ξεθάλαμα Τεστ».*

8 Το τεστ μου έδειξε ότι είμαι έγκυος. Τι πρέπει να κάνω; Εάν το αποτέλεσμα του τεστ είναι «Έγκυος», θα πρέπει να επικοινωνή. με το γιατρό σας για να συζητήσετε σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθή.τε. Ο δείκτης σύλληψης προσφέρει μόνο μια εκτίμηση για το πότε συλλαβά.τε. Ο γιατρός σας θα υπολογί.σει το στάδιο της εγκυμοσύνης σας βάσει της πρώτης ημέρας της τελευταίας σας περιόδου. Η σύλληψη συμβαίνει περίπου 2 εβδομάδες πριν την αναμενόμενη ημέρα έναρξης της επόμενης περιόδου σας.

9 Το τεστ μου λέει ότι είμαι έγκυος, αλλά δεν νομίζω ότι συνέλαβα την περίοδο που μου υποδεικνύει ο δείκτης σύλληψης. Είναι δυνατόν; Ο δείκτης σύλληψης είναι 93% ακριβής, όταν το τεστ γίνεται με τα πρώτα πρωινά ούρα. Ορισμένα φάρμακα ή ορισμένες παθήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. *Ανατρέξτε στην ερώτηση 5.*

10 Έκανα το τεστ χτες και το αποτέλεσμα ήταν «Έγκυος». Ξαναέκανα το τεστ σήμερα, και σύμφωνα με το δείκτη σύλληψης, ο αριθμός των εβδομάδων από τότε που συνέλαβα έχει μειωθεί. Τι πρέπει να κάνω;

Τα επίπεδα της hCG μεταβάλλονται καθώς αυτή αυξάνεται και επομένως είναι πιθανό ο δείκτης σύλληψης να δώσει μη αναμενόμενα αποτελέσματα εάν κάνετε το τεστ κάθε μέρα να συνεχόμενες μέρες. Κάντε ξανά το τεστ μέσα σε 5 ημέρες και, εάν τα αποτελέσματα του δείκτη σύλληψης δείχνουν ακόμη ότι

ο αριθμός των εβδομάδων από τότε που συλλαβά.τε έχει μειωθεί, *ανατρέξτε στην ερώτηση 12.*

11 Το προηγούμενο μου τεστ έδειξε «Έγκυος» αλλά ξαναέκανα το τεστ και το αποτέλεσμα ήταν «Όχι Έγκυος», ή ξεκίνησε η περίοδος μου. Τι σημαίνει αυτό; Ενώ το τεστ έχει ακριβεία μεγαλύτερη από 99% στο να ανιχνεύει την ορμόνη της εγκυμοσύνης από την αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης της περιόδου, είναι δυνατόν να λάβετε αποτέλεσμα «Έγκυος» και να ανακαλύψετε αργότερα ότι δεν είστε έγκυος (δηλ. μπορεί αργότερα να λάβετε αποτέλεσμα «Όχι Έγκυος», ή να ξεκινή.τε η περίοδος σας). Αυτό μπορεί να οφείλεται σε φυσική αποβολή κατά τη διάρκεια των πρώιμων σταδίων εγκυμοσύνης, γνωστή ως «πρώιμη αποβολή κύησης», η οποία δύστυχως δεν είναι σπάνια, καθώς περίπου 1 στις 4 εγκυμοσύνης καταλήγουν σε πρώιμη αποβολή κύησης. Η αποβολή μπορεί να είναι μη αναμενόμενη, ή/ήποτε τη συμβουλή του γιατρού σας.

12 Έκανα το τεστ πριν από μια εβδομάδα και το αποτέλεσμα ήταν «Έγκυος». Ξαναέκανα το τεστ, και σύμφωνα με το δείκτη σύλληψης, ο αριθμός των εβδομάδων από τότε που συνέλαβα έχει μειωθεί. Τι πρέπει να κάνω; Εάν κάνετε το τεστ σύμφωνα με τις οδηγίες, με τα πρώτα πρωινά ούρα και στις δύο περιπτώσεις, και ο δείκτης σύλληψης έδωσε μη αναμενόμενα αποτελέσματα, θα πρέπει να επικοινωνή.τε το γιατρό σας.

13 Το τεστ μου δείχνει «Όχι Έγκυος». Τι πρέπει να κάνω; Μπορεί να μην είστε έγκυος ή τα επίπεδα της hCG της εγκυμοσύνης μπορεί να μην είναι αρκετά υψηλά ώστε είναι ανιχνεύ.σιμη ή μπορεί να μη υπολογί.σεται σωστά την ημέρα που περιμένετε την επόμενη σας περίοδο.

- Εάν κάνετε το τεστ νωρίς, επαναλάβετε το τεστ την ημέρα που αναμένετε την περίοδο σας.
- Εάν έχει καθυστερή.σι η περίοδος σας, επαναλάβετε το τεστ μετά από 3 ημέρες. Εάν το αποτέλεσμα είναι και πάλι «Όχι Έγκυος», και εξακολουθεί να μην έχει περίοδο, συμβουλευτεί.τε το γιατρό σας.

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΕΣΤ

Σφάλμα ένδειξης βιβλίου - κάποιο σφάλμα προέκυψε κατά τη διεξαγωγή του τεστ.

- Να μην κροτώ.σιτε το απορροφητικό άκρο προς τα κάτω ή να μην τοποθετή.σιτε το τεστ σε επίπεδη επιφάνεια μετά την απορρόφηση των ούρων.
- Να απορροφή.θηκε υπερβολική ή ελάχιστη ποσότητα ούρων.

Θα πρέπει να επαναλάβετε το τεστ χρησιμοποιώντας ένα καινούριο τεστ και ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες.

Σφάλμα κενής ένδειξης

Η εκτέλεση του τεστ δεν ήταν η προβλεπόμενη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν ακολουθή.σατε τις οδηγίες χρήσης. Θα χρειαστεί να κάνετε ένα άλλο τεστ. Ακολουθή.σατε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ

Αφαιρέ.σιτε την μπαταρία πριν από την απόρριψη του δοκιμαστικού στικ. Η απόρριψη της μπαταρίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την κατάλληλη μέθοδο ανακύκλωσης. Για να μην φοβη.σείτε, εισάγε.τε ένα νόμισμα στη σχισμή που βρίσκεται για να κλεί.σει και να γυρί.σιτε το για να απ.σεί.σι και να ανοί.σιτε το πίσω μέρος του δοκιμαστικού στικ. Εάν η μπαταρία δεν είναι ορατή, α.σθή.σατε προς τα έξω τη βάση της μπαταρίας στην κατεύθυνση του βέλους για ευκολότερη αφαίρεση.

Προσοχή! Μην αποσυρναρμολογείτε, επαναφορτί.σιτε ή πετά.σιτε τη μπαταρία στη φωτιά. Πελά.σιτε το υπόλοιπο μέρος του δοκιμαστικού στικ σύμφωνα με την κατάλληλη μέθοδο ανακύκλωσης για ηλεκτρικό εξοπλισμό. Μην πετά.σιτε ηλεκτρικό εξοπλισμό στη φωτιά.

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τις απαιτήσεις ηλεκτρονικών εκπομπών του προτύπου EN61326. Η ηλεκτρονική της εκπομπή, επομένως, είναι χαμηλή. Δεν αναμένεται παρεμβολή από άλλον ηλεκτρικό εξοπλισμό. Αυτό το τεστ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε πηγές ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, π.χ. κινητά τηλέφωνα, καθώς αυτές μπορούν να εμπεδίσουν την ορθή λειτουργία του τεστ. Για να απονύ.σιτε την ηλεκτροστατική εκφόρτιση, μη χρησιμοποιή.σιτε το τεστ σε πολύ ξηρό περιβάλλον, και ιδιαίτερα σε περιβάλλον με πολλά συνθετικά υλικά.

Το τεστ εγκυμοσύνης για χρήση κατά οικ.ον. Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση. Όχι για εξωτερική χρήση. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αφή.σιτε το τεστ να φθά.σιτε σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά πριν να το χρησιμοποιή.σιτε, εάν το έχετε φυλά.σιτε στο ψυγείο. Μη χρησιμοποιή.σιτε το προϊόν εάν έχει καταστρα.φεί το αλουμινοειδές περιτύλιγμα που περιέχει το δοκιμαστικό στικ. Μη χρησιμοποιή.σιτε το δοκιμαστικό στικ εάν έχει παρέλ.σιτε η ημερομηνία λήξης του. Αυτό το προϊόν εμπεριέ.χι τη μπαταρία. Απορρί.σιτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Οι παρού.σιτε οδηγίες αφορούν τον αριθμό μοντέλου C89A020F.

www.clearblue.com

Για ερωτή.σιτε σχετικά με το προϊόν, παρακάτω επικοινωνή.σατε με το τμήμα εξυπηρέτη.σις πελατών στην παρακάτω διεύθυνση:



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, G.ε.ν.ε.λ.β.ε.ρ.ι.α.

Το Clearblue είναι εμπορικό σήμα της SPD. © 2015 SPD. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Διανομή στην Ελλάδα: Γ.Ρ. ΣΑΡΑΝΤΙΣ ΑΒΕΕ, Αμμοχώστου-Χαλκιδέων 26, 151 25 Μαρούσι, www.sarantis.gr

 In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή	 Κωδικός παρτίδας	 Μην το επαναχρησιμοποιή.σιτε
 Περιορισμένη θερμοκρασία 2°C - 30°C	 Ημερομηνία λήξης	 Κατασκευαστής