

Τεστ Εγκυμοσύνης με Δείκτη Σύλληψης

- Εάν χρησιμοποιήσετε το τεστ από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας για να μάθετε εάν είστε έγκυος.
- Εάν κάνετε το τεστ πριν από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας, χρησιμοποιήστε τα πρώτα πρωινά ούρα.
- Για ακριβές αποτέλεσμα του Δείκτη Σύλληψης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα πρώτα πρωινά ούρα της ημέρας.
- Μην πίνετε πολλά υγρά πριν κάνετε το τεστ.
- **Διαβάστε αυτό το φυλλάδιο προσεκτικά πριν κάνετε το τεστ.**

1 Κάντε το τεστ

Όταν είστε έτοιμη να κάνετε το τεστ, αφαιρέστε το δοκιμαστικό στικ του τεστ από το αλουμινένιο περιτύλιγμα και αφαιρέστε το γαλάζιο καπάκι. Χρησιμοποιήστε το δοκιμαστικό στικ αμέσως.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ


Κάντε το τεστ στη ροή των ούρων σας

- Κρατήστε το απορροφητικό άκρο, με κατεύθυνση προς τα κάτω, στη ροή των ούρων σας **μόνο για 5 δευτερόλεπτα**.
- Προσέξτε να μη βρέξετε το υπόλοιπο δοκιμαστικό στικ.
- Μπορείτε να επανατοποθετήσετε το καπάκι και να αφήσετε το δοκιμαστικό στικ σε μια επίπεδη επιφάνεια.



Συλλέξτε ένα δείγμα των ούρων σας σε ένα καθαρό, στεγνό δοχείο

- Κρατήστε το απορροφητικό άκρο, με κατεύθυνση προς τα κάτω μέσα στα ούρα, όπως φαίνεται στην εικόνα, **μόνο για 20 δευτερόλεπτα**.
- Μπορείτε να επανατοποθετήσετε το καπάκι και να αφήσετε το δοκιμαστικό στικ σε μια επίπεδη επιφάνεια.

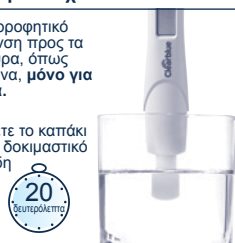

2 Περιμένετε...

- Θα εμφανιστεί αναβοσβήνοντας το σύμβολο αναμονής που υποδεικνύει ότι το τεστ λειτουργεί.
- Όταν σταματήσει να αναβοσβήνει το σύμβολο αναμονής, θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα του τεστ. Εάν το σύμβολο αναμονής δεν εμφανιστεί αφού έχετε χρησιμοποιήσει το τεστ, βλ. Ε6.



Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να κρατάτε το δοκιμαστικό στικ με το απορροφητικό άκρο προς τα πάνω, κατά τη διάρκεια του τεστ.

3 Διαβάστε το αποτέλεσμα σας

Ο **Δείκτης Σύλληψης** προσφέρει μια εκτίμηση για το πότε συλλάβατε. Η πληροφορία αυτή εμφανίζεται στην οθόνη μαζί με το αποτέλεσμα «Έγκυος».

- Μέσα σε **3 λεπτά**, εμφανίζεται το αποτέλεσμα σας στην οθόνη.
- Το αποτέλεσμα «Έγκυος» ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη **πριν** από το αποτέλεσμα του Δείκτη Σύλληψης. **Περιμένετε** μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το σύμβολο αναμονής για να δείτε το αποτέλεσμα του Δείκτη Σύλληψης. Αυτό μπορεί να χρειαστεί μέχρι και 3 λεπτά.
- Σε κάποιες περιπτώσεις, τα αποτελέσματα εμφανίζονται μόλις σε 1 λεπτό.
- Το αποτέλεσμα θα παραμείνει στην οθόνη για περίπου 24 ώρες.
- Εάν το αποτέλεσμα του τεστ είναι «Έγκυος», θα πρέπει να επισκεφθείτε το γιατρό σας για να σας συμβουλευτεί σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε. Ο γιατρός σας θα υπολογίσει το στάδιο της εγκυμοσύνης σας βάσει της πρώτης ημέρας της τελευταίας σας περιόδου.
- Η σύλληψη συμβαίνει περίπου 2 εβδομάδες πριν την αναμενόμενη ημέρα έναρξης της επόμενης περιόδου σας. Ο Δείκτης Σύλληψης προσφέρει μια εκτίμηση για το πότε συλλάβατε.
- Ο Δείκτης Σύλληψης είναι 93% ακριβής στο να ανιχνεύει την ημερομηνία σύλληψης. Η εκτίμηση βασίζεται στα επίπεδα της

ορμόνης της εγκυμοσύνης hCG (ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη) στα ούρα σας. Τα επίπεδα της hCG διαφέρουν από γυναίκα σε γυναίκα, και επομένως είναι πιθανόν ο Δείκτης Σύλληψης να δίνει ενίοτε παραπλανητικά αποτελέσματα. Η ακρίβεια του αποτελέσματος «Έγκυος»/«Όχι Έγκυος» είναι μεγαλύτερη από 99% όταν κάνετε το τεστ από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας.

Σφάλματα Τεστ

Διαβάστε την ενότητα «Σφάλματα τεστ» εάν έχετε χρησιμοποιήσει το δοκιμαστικό στικ και στην οθόνη δεν εμφανίζεται κανένα από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα.

Πώς να ερμηνεύετε τα αποτελέσματα

Αποτέλεσμα	Χρόνος από τη σύλληψη	Πώς ο γιατρός σας θα καθορίσει το στάδιο της εγκυμοσύνης σας (με βάση έναν κύκλο 28 ημερών*)
	Το αποτέλεσμα σας είναι Όχι Έγκυος βλ. Ε13.	-
	Το αποτέλεσμα σας είναι Έγκυος και συλλάβατε περίπου πριν από 1-2 εβδομάδες.	3-4 εβδομάδες
	Το αποτέλεσμα σας είναι Έγκυος και συλλάβατε περίπου πριν από 2-3 εβδομάδες.	4-5 εβδομάδες
	Το αποτέλεσμα σας είναι Έγκυος και συλλάβατε πριν από περισσότερες από 3 εβδομάδες.	5+ εβδομάδες

*Ο γιατρός σας θα ορίσει τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας από την πρώτη ημέρα της τελευταίας σας περιόδου, όχι από την ημέρα που συλλάβατε.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

- 1 Πώς λειτουργεί το Clearblue με Δείκτη Σύλληψης;**
Όταν είστε έγκυος, ο οργανισμός σας παράγει την ορμόνη της εγκυμοσύνης, ΗCG (αποκαλείται «εγκυογονινοτρίνη»). Η ποσότητα της ΗCG στο σώμα σας αυξάνεται κατά τα πρώιμα στάδια της εγκυμοσύνης. Αυτό το τεστ μπορεί να ανιχνεύσει ακόμα και ελάχιστες ποσότητες αυτής της ορμόνης στο σώμα σας (η ευαισθησία του τεστ είναι 25 mIU/ml). Βάσει των επιπέδων της ΗCG στο σώμα σας, ο Δείκτης Σύλληψης προσφέρει μια εκτίμηση για το πότε συλλάβετε.
- 2 Πόσο ακριβές είναι το Clearblue με Δείκτη Σύλληψης στην ανίχνευση της εγκυμοσύνης;**
Στις εργαστηριακές εξετάσεις, το Clearblue με Δείκτη Σύλληψης είναι πάνω από 99% ακριβές στο να ανιχνεύει εάν είστε έγκυος ή όχι, όταν χρησιμοποιείται από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας. Εάν κάνετε το τεστ πριν από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας και λάβετε ένα αποτέλεσμα «Όχι Έγκυος», εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης. Βλ. Ε4.
- 3 Πόσο ακριβής είναι ο Δείκτης Σύλληψης;**
Ο Δείκτης Σύλληψης είναι 93% ακριβής στο να ανιχνεύει την ημερομηνία σύλληψης. Η εκτίμηση βασίζεται στα επίπεδα της ΗCG στο σώμα σας. Τα επίπεδα της ΗCG διαφέρουν από γυναίκα σε γυναίκα, και επομένως είναι πιθανόν ο Δείκτης Σύλληψης να δίνει ενίοτε παραπληρώματα αποτελέσματα. Ο Δείκτης Σύλληψης αποδοχίσθηκε επί συμφωνία κατά 97% με το μεταγενέστερο υπερηχογράφημα προσδιορισμού ηλικίας κύησης (11-13 εβδομάδες). Με βάση μελέτες, 187 γυναίκες που συγκρίναν τα αποτελέσματα (1-2, 2-3, 3+ εβδομάδες από τη σύλληψη) με τη χρονολογημένη υπέρηχο. Εάν κάνετε το τεστ πάνω από 6 εβδομάδες μετά τη σύλληψη, ο Δείκτης Σύλληψης μπορεί να δώσει μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται στα γεγονότα ότι τα επίπεδα της ΗCG στα σώρα είναι πολύ υψηλά ώστε το τεστ να μην μπορεί να δώσει ακριβή εκτίμηση του χρόνου που μεσολάβησε από τη σύλληψη.
- 4 Πότε μπορεί να χρησιμοποιησω το Clearblue με Δείκτη Σύλληψης;**
Μπορείτε να κάνετε το τεστ μέχρι 5 ημέρες πριν από την καθυστέρηση σας (δηλαδή 4 ημέρες πριν από την αναμενόμενη περίοδο σας). Εάν κάνετε το τεστ πριν από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας και λάβετε ένα αποτέλεσμα «Όχι Έγκυος», εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης. Βλ. το διάγραμμα παρακάτω για αποτελέσματα από κλινικές μελέτες με πρώιμα δείγματα τεστ εγκυμοσύνης.

Πρώιμοι Ελέγχος				
Αριθμός ημερών πριν από την αναμενόμενη περίοδο	-1	-2	-3	-4
% του δείγματος εγκύων γυναικών είχαν αποτέλεσμα «Έγκυος»	98%	97%	90%	65%

Εάν το αποτέλεσμα είναι «Όχι Έγκυος» και εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα εγκυμοσύνης, βλ. Ε13.

Για να βρείτε την αναμενόμενη ημέρα έναρξης της περιόδου σας, υπολογίστε τη συνήθη διάρκεια του κύκλου σας μετρώντας τον αριθμό ημερών από τη πρώτη ημέρα της περιόδου σας μέχρι την ημέρα που ξεκινάει η επόμενη περίοδος σας. Εάν έχετε ακανόνιστους κύκλους, λάβετε υπόψη το μεγαλύτερο κύκλο που είχατε τους τελευταίους μήνες πριν από το τεστ.

- 5 Μπορεί κάποιο φάρμακο ή κάποιες ιατρικές διαδικασίες να επηρεάσουν τα αποτελέσματα;**
Διαβάζετε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή για οποιοδήποτε φάρμακο λαμβάνετε πριν από τη

- διαδικασία ενός τεστ.
• Τα φάρμακα γονιμοποίησης που περιέχουν hCG μπορεί να ενοχλήσουν τα παραπάνω αποτελέσματα (αυτά τα φάρμακα γονιμοποίησης χορηγούνται με ενέχυρη μορφή και η διαχείριση του τεστ σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη χορήγηση τους μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα «Έγκυος».)
• Άλλες θεραπευτικές γονιμοποιήσεις (όπως η κτητική κλωνοποίηση), παύση των και ορμονικά αντισυλληπτικά (π.χ. αντισυλληπτικό χάπι) δεν επηρεάζουν κατά κανόνα το αποτέλεσμα.
• Εάν έχετε πρόσφατα διακοφεί τη χρήση ορμονικής αντισυλληπτικής ή χρησιμοποιείτε θεραπευτικές γονιμοποιήσεις, όπως κτητική κλωνοποίηση, ο κύκλος σας μπορεί να παρουσιάσει ανωμαλίες, με αποτέλεσμα να κάνετε το τεστ πιο νωρίς από ό,τι θα έπρεπε.
• Εάν υπήρχε πρόσφατα έγκυος (ακόμα και αν δεν ολοκληρώθηκε η κύηση) μπορεί να λάβετε ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα «Έγκυος».
• Εάν έχετε μπει ή πρόκειται να μπειτε στην εμμηνοποίηση, μπορεί να λάβετε ένα ψευδώς αποτέλεσμα «Έγκυος» ακόμα και αν δεν είστε έγκυος.
• Μια εμμηνοιακή κύηση και οι ισοθερμικές κύστες ενδέχεται να ενοχλήσουν τα παραπάνω αποτελέσματα.
• Οι πολυπληθείς και οι εκτοπικές εγκυμοσύνες ενδέχεται να δώσουν παραπληρώματα αποτελέσματα Δείκτη Σύλληψης εβδομάδων.
Εάν τα αποτελέσματα του τεστ είναι μη αναμενόμενα, θα πρέπει να τα συζητήσετε με το γιατρό σας.

- 6 Χρησιμοποιώ το τεστ, αλλά δεν εμφανίζεται το αποτέλεσμα.**
Δεν ήταν σωστή η τεχνική του τεστ. Βλ. Σφάλματα τεστ.
- 7 Χρησιμοποιώ το τεστ, αλλά δεν εμφανίζεται κανένα αποτέλεσμα στην οθόνη. Τι σημαίνει αυτό;**
Το αποτέλεσμα θα πρέπει να εμφανιστεί στην οθόνη μέσα σε 3 λεπτά. Εάν δεν εμφανιστεί κανένα αποτέλεσμα, βλ. Σφάλματα τεστ.
- 8 Το τεστ μου έδειξε ότι είμαι έγκυος. Τι πρέπει να κάνω;**
Εάν το αποτέλεσμα του τεστ είναι «Έγκυος», θα πρέπει να επισκεφθείτε το γιατρό σας για να σας συμβουλευτεί σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε. Ο Δείκτης Σύλληψης προσφέρει μόνο μια εκτίμηση για το πότε συλλάβετε. Ο γιατρός σας θα υπολογίσει το στάδιο της εγκυμοσύνης σας βάσει της πρώτης ημέρας της τελευταίας σας περιόδου. Η σύλληψη συμβαίνει περίπου 2 εβδομάδες πριν την αναμενόμενη ημέρα έναρξης της επόμενης περιόδου σας.
- 9 Το τεστ μου λέει ότι είμαι έγκυος, αλλά δεν νομίζω ότι συνέλαβα την περίοδο που μου υποδεικνύει ο Δείκτης Σύλληψης. Είναι δυνατό;**
Ο Δείκτης Σύλληψης είναι 93% ακριβής, όταν το τεστ γίνεται με τα πρώτα πρωίνα ούρα της ημέρας. Ορισμένα φάρμακα ή ορισμένες ιατρικές καταστάσεις ενδέχεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Βλ. Ε5.
- 10 Έκανα το τεστ χθες και το αποτέλεσμα ήταν «Έγκυος». Ξαφάκανα το τεστ σήμερα, και σύμφωνα με το Δείκτη Σύλληψης, ο αριθμός των εβδομάδων από τότε που συνέλαβα έχει μειωθεί. Τι πρέπει να κάνω;**
Τα επίπεδα της ΗCG παρουσιάζουν διακύμανση καθώς αυξάνεται και επομένως είναι πιθανό ο Δείκτης Σύλληψης να δώσει μη αναμενόμενα αποτελέσματα εάν κάνετε το τεστ κάθε μέρα για συνεχόμενες ημέρες. Κάντε ξανά το τεστ μέσα σε 5 ημέρες και, εάν τα αποτελέσματα του Δείκτη Σύλληψης δείχνουν ακόμη ότι ο αριθμός των εβδομάδων από τότε που συλλάβετε έχει μειωθεί, βλ. Ε12.
- 11 Το προηγούμενο μου τεστ έδειξε «Έγκυος» αλλά ξαφάκανα το τεστ και το αποτέλεσμα ήταν «Όχι Έγκυος», ή ξεκίνησε η περίοδος μου. Τι σημαίνει αυτό;**

- Ενώ το τεστ έχει ακρίβεια μεγαλύτερη από 99% στο να ανιχνεύει την ορμόνη της εγκυμοσύνης από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας, είναι δυνατό να λάβετε ένα αποτέλεσμα «Έγκυος» και να ανακαλύψετε αργότερα ότι δεν είστε έγκυος (δηλ. μπορεί αργότερα να λάβετε αποτέλεσμα «Όχι Έγκυος», ή να ξεκινήσει η περίοδος σας). Αυτό μπορεί να οφείλεται σε φυσική απώλεια κατά τη διάρκεια των πρώιμων σταδίων εγκυμοσύνης. Υπάρχει ως «πρώιμη απώλεια κύησης», ο αριθμός των διατυμώσεων είναι όταν σπάνια, καθώς περίπου 1 στις 4 εγκυμοσύνες καταλήγουν σε πρώιμη απώλεια κύησης. Εάν τα αποτελέσματα είναι μη αναμενόμενα, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας.
- 12 Έκανα το τεστ πριν από μία εβδομάδα και το αποτέλεσμα ήταν «Έγκυος». Ξαφάκανα το τεστ, και σύμφωνα με το Δείκτη Σύλληψης, ο αριθμός των εβδομάδων από τότε που συνέλαβα έχει μειωθεί. Τι πρέπει να κάνω;**
Εάν κάνετε το τεστ σύμφωνα με τις οδηγίες, με τα πρώτα πρωίνα ούρα της ημέρας και στις δύο περιπτώσεις, και ο Δείκτης Σύλληψης έδωσε μη αναμενόμενα αποτελέσματα, θα πρέπει να επισκεφθείτε το γιατρό σας.
- 13 Το τεστ μου δείχνει «Όχι Έγκυος». Τι πρέπει να κάνω;**
Μπορεί να μην είστε έγκυος ή τα επίπεδα της ορμόνης της εγκυμοσύνης μπορεί να μην είναι αρκετά υψηλά ώστε να είναι ανιχνεύσιμα ή μπορεί να μην υπολογίστηκε σωστά την ημέρα που περιμένετε την επόμενη σας περίοδο.
• Εάν κάνετε το τεστ νωρίς, επαναλάβετε το τεστ την ημέρα που αναμένετε την περίοδο σας.
• Εάν έχετε καθυστερήσει η περίοδος σας, επαναλάβετε το τεστ μετά από 3 ημέρες. Εάν το αποτέλεσμα του τεστ είναι και πάλι «Όχι Έγκυος» και εξακολουθεί να μην έχετε περίοδο, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Σφάλματα τεστ

- Σφάλμα ένδειξης βιβλίου** - κάποιο σφάλμα προέκυψε κατά τη διεξαγωγή του τεστ. Πιθανόν:
- Να μην κρατούσατε το απορροφητικό άκρο προς τα κάτω ή να μην τοποθετήσατε το τεστ σε επίπεδη επιφάνεια μετά την απορρόφηση των ούρων.
 - Να απορροφήθηκε υπερβολική ή ελάχιστη ποσότητα ούρων.

Θα πρέπει να επαναλάβετε το τεστ χρησιμοποιώντας ένα νέο τεστ και ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες.

Σφάλμα κενής ένδειξης
Το τεστ δεν λειτουργεί σύμφωνα με τα αναμενόμενα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν ακολουθήσατε τις οδηγίες που χρησιμοποίησατε ή ότι το τεστ που κάνατε είναι άλλο τεστ. Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά.

Απόρριψη του τεστ

Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από την απόρριψη του δοκιμαστικού στικ. Η απόρριψη της μπαταρίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την κατάλληλη μεθοδολογία ανακύκλωσης. Για να την αφαιρέσετε, εισάγετε ένα νομίσμα στη σχισμή που βρίσκεται στο άκρο και γυρίστε το για να σπάσει και να ανοίξει το πίσω μέρος του δοκιμαστικού στικ. Εάν η μπαταρία δεν είναι ορατή, ολισθήστε προς τα έξω την υποδοχή της μπαταρίας στην κατεύθυνση του βέλους για ευκολότερη αφαίρεση. Προσοχή! Μην αποσυναρμολογείτε, επαναφορτίσετε ή πετάτε τη μπαταρία στη φωτιά. Πετσίστε το υπόλοιπο στικ στο δοκιμαστικό στικ σύμφωνα με την κατάλληλη μέθοδο ανακύκλωσης για ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Μην πετάτε ηλεκτρονικό εξοπλισμό στη φωτιά.

Για αυτοέλεγχο στο σπίτι.

Μόνο για *in vitro* διαγνωστική χρήση.

Όχι για εσωτερική χρήση.

Μην το επαναχρησιμοποιείτε.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 2° - 30°C.

Αφαιρθεί το τεστ να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά πριν να το χρησιμοποιήσετε, εάν το είχατε φυλαγμένο στο ψυγείο.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει καταστραφεί το αλουμινόχαρτο περιτύλιγμα.

Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μπαταρίες.

Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Αυτή η ψηφιακή συσκευή IVD είναι συμβατή με τις απαιτήσεις εκπομπών και απώσεως του προτύπου EN 61326-2-6:2006. Τα αντισταθμιστικά μέτρα EMC που χρησιμοποιούνται στο ηλεκτρονικό όργανο θα παρέχουν εύλογη προστασία του επιδόσεως ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής που είναι πιθανό να υπάρχουν στο οικιακό περιβάλλον. Οι ακόλουθες προληπτικές προδιαγραφές ισχύουν για εξοπλισμό που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61326-2-6:2006. α) Η χρήση αυτού του οργάνου σε ζήρο περιβάλλον, ιδίως εάν είναι παρόντα συνδυαστικά υλικά (συνθετικά ρούχα, χαλάκια κ.λ.) μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν εσφαλμένα αποτελέσματα. β) Μην χρησιμοποιείτε το όργανο κοντά σε πηγές ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (π.χ. κινητά τηλέφωνα), καθώς αυτές μπορεί να παρεμβληθούν στη συστή λειτουργία.

www.clearblue.com

Διανομή στην Ελλάδα: ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, 151 25 Μαρούσι, www.sarantis.gr



	Κατασκευαστής		Μην το επαναχρησιμοποιείτε
	Κωδικός παρτίδας		In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή
	Ημερομηνία λήξης		Όριο θερμοκρασίας 2°C - 30°C

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, Ελβετία.
Το Clearblue είναι εμπορικό σήμα της SPD.
© 2019 SPD. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 2300509.02 03-2019

