

Τεστ Εγκυμοσύνης με Δείκτη Σύλληψης

- Εάν χρησιμοποιήσετε το τεστ από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας για να μάθετε εάν είστε έγκυος.
- Εάν κάνετε το τεστ πριν από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας, χρησιμοποιήστε τα πρώτα πρωινά ούρα.
- Για ακριβές αποτέλεσμα του Δείκτη Σύλληψης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα πρώτα πρωινά ούρα της ημέρας.
- Μην πίνετε πολλά υγρά πριν κάνετε το τεστ.
- **Διαβάστε αυτό το φυλλάδιο προσεκτικά πριν κάνετε το τεστ.**

1 Κάντε το τεστ

Όταν είστε έτοιμη να κάνετε το τεστ, αφαιρέστε το δοκιμαστικό στικ του τεστ από το αλουμινένιο περιτύλιγμα και αφαιρέστε το γαλάζιο καπάκι. Χρησιμοποιήστε το δοκιμαστικό στικ αμέσως.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ

Κάντε το τεστ στη ροή των ούρων σας

Συλλέξτε ένα δείγμα των ούρων σας σε ένα καθαρό, στεγνό δοχείο

- Κρατήστε το απορροφητικό άκρο, με κατεύθυνση προς τα κάτω, στη ροή των ούρων σας **μόνο για 5 δευτερόλεπτα**.
- Προσέξτε να μη βρέξετε το υπόλοιπο δοκιμαστικό στικ.
- Μπορείτε να επανατοποθετήσετε το καπάκι και να αφηρέσετε το δοκιμαστικό στικ σε μια επίπεδη επιφάνεια.




- Κρατήστε το απορροφητικό άκρο, με κατεύθυνση προς τα κάτω μέσα στα ούρα, όπως φαίνεται στην εικόνα, **μόνο για 20 δευτερόλεπτα**.
- Μπορείτε να επανατοποθετήσετε το καπάκι και να αφηρέσετε το δοκιμαστικό στικ σε μια επίπεδη επιφάνεια.



2 Περιμένετε...

- Θα εμφανιστεί αναβοσβήνοντας το σύμβολο αναμονής που υποδεικνύει ότι το τεστ λειτουργεί.
- Όταν σταματήσει να αναβοσβήνει το σύμβολο αναμονής, θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα του τεστ. Εάν το σύμβολο αναμονής δεν εμφανιστεί αφού έχετε χρησιμοποιήσει το τεστ, βλ. Ε6.

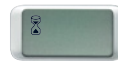

Σε **κάμια περίπτωση** δε θα πρέπει να κρατάτε το δοκιμαστικό στικ με το απορροφητικό άκρο προς τα πάνω, κατά τη διάρκεια του τεστ.

3 Διαβάστε το αποτέλεσμα σας

Ο **Δείκτης Σύλληψης** προσφέρει μια εκτίμηση για το πότε συλλάβατε. Η πληροφορία αυτή εμφανίζεται στην οθόνη μαζί με το αποτέλεσμα «Έγκυος».

- Μέσα σε **3 λεπτά**, εμφανίζεται το αποτέλεσμα σας στην οθόνη.
- Το αποτέλεσμα «Έγκυος» ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη **πριν** από το αποτέλεσμα του Δείκτη Σύλληψης. **Περιμένετε** μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το σύμβολο αναμονής για να δείτε το αποτέλεσμα του Δείκτη Σύλληψης. Αυτό μπορεί να χρειαστεί μέχρι και 3 λεπτά.
- Σε κάποιες περιπτώσεις, τα αποτελέσματα εμφανίζονται μόλις σε 1 λεπτό.
- Το αποτέλεσμα θα παραμείνει στην οθόνη για περίπου 24 ώρες.
- Εάν το αποτέλεσμα του τεστ είναι «Έγκυος», θα πρέπει να επισκεφθείτε το γιατρό σας για να σας συμβουλευτεί σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε. Ο γιατρός σας θα υπολογίσει το στάδιο της εγκυμοσύνης σας βάσει της πρώτης ημέρας της τελευταίας σας περιόδου.
- Η σύλληψη συμβαίνει περίπου 2 εβδομάδες πριν την αναμενόμενη ημέρα έναρξης της επόμενης περιόδου σας. Ο Δείκτης Σύλληψης προσφέρει μια εκτίμηση για το πότε συλλάβατε.
- Ο Δείκτης Σύλληψης είναι 93% ακριβής στο να ανιχνεύει την ημερομηνία σύλληψης. Η εκτίμηση βασίζεται στα επίπεδα της

ορμόνης της εγκυμοσύνης hCG (ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη) στα ούρα σας. Τα επίπεδα της hCG διαφέρουν από γυναίκα σε γυναίκα, και επομένως είναι πιθανόν ο Δείκτης Σύλληψης να δίνει ενίοτε παραπληκτικά αποτελέσματα. Η ακρίβεια του αποτελέσματος «Έγκυος»/«Όχι Έγκυος» είναι μεγαλύτερη από 99% όταν κάνετε το τεστ από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας.

Σφάλματα Τεστ

Διαβάστε την ενότητα «Σφάλματα τεστ» εάν έχετε χρησιμοποιήσει το δοκιμαστικό στικ και στην οθόνη δεν εμφανίζεται κανένα από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα.

Πώς να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα

Αποτέλεσμα	Χρόνος από τη σύλληψη	Πώς ο γιατρός σας θα καθορίσει το στάδιο της εγκυμοσύνης σας (με βάση έναν κύκλο 28 ημερών*)
	Το αποτέλεσμα σας είναι Όχι Έγκυος βλ. E13.	-
	Το αποτέλεσμα σας είναι Έγκυος και συλλάβατε περίπου πριν από 1-2 εβδομάδες.	3-4 εβδομάδες
	Το αποτέλεσμα σας είναι Έγκυος και συλλάβατε περίπου πριν από 2-3 εβδομάδες.	4-5 εβδομάδες
	Το αποτέλεσμα σας είναι Έγκυος και συλλάβατε πριν από περισσότερες από 3 εβδομάδες.	5+ εβδομάδες

*Ο γιατρός σας θα ορίσει τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας από την πρώτη ημέρα της τελευταίας σας περιόδου, όχι από την ημέρα που συλλάβατε.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

1 Πώς λειτουργεί το Clearblue με Δείκτη Σύλληψης;
 Ο όρος «δείκτης» οφείλεται στο γεγονός ότι η μέτρηση της εγκυμοσύνης hCG (ανθρώπινη χορηκή ναοδοτρόπίνη). Η ποσότητα της hCG στο ούμα σας αυξάνεται κατά τα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης. Αυτό το τεστ μπορεί να ανιχνεύσει ακόμα και ελάχιστες ποσότητες αυτής της ορμόνης στα ούρα σας (η ευαισθησία του είναι 25 mIU/ml). Εξαιτίας αυτών επιτυγχάνει η hCG στα ούρα σας, ο Δείκτης Σύλληψης προσφέρει μια εκτίμηση για το πόσο συλλαβείτε.

2 Πόσο ακριβές είναι το Clearblue με Δείκτη Σύλληψης στην ανίχνευση της εγκυμοσύνης;
 Στις εργαστηριακές εξετάσεις, το Clearblue με Δείκτη Σύλληψης είναι πάνω από 99% ακριβές στο να ανιχνεύσει εάν είστε έγκυος ή όχι, όταν χρησιμοποιείτε από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας. Εάν κάνετε το τεστ πριν από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας και λάβετε ένα αποτέλεσμα «Όχι Έγκυος», εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης. Βλ. Ε4.

3 Πόσο ακριβές είναι ο Δείκτης Σύλληψης;
 Ο Δείκτης Σύλληψης είναι 93% ακριβής στο να ανιχνεύει την ημερομηνία σύλληψής. Η εκτίμηση βασίζεται στα επίπεδα της hCG στα ούρα σας. Τα επίπεδα της hCG διαφέρουν από γυναίκα σε γυναίκα, και επομένως είναι πιθανό ο Δείκτης Σύλληψης να δίνει ενίοτε παραπλανητικά αποτελέσματα. Ο Δείκτης Σύλληψης αποδείχθηκε ότι συμφωνεί κατά 97% με το μετανεότερο υπερηχογράφημα προσδιορισμού ηλικίας κύησης (11-13 εβδομάδες). Με βάση μελέτες 187 γυναικών που συγκρίναν τα αποτελέσματα (1-2, 2-3, 3+ εβδομάδες από το σύλληψη) με τη χρονολογική υπέρηχο. Εάν κάνετε το τεστ πάνω από 6 εβδομάδες μετά τη σύλληψη, ο Δείκτης Σύλληψης μπορεί να δώσει μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα επίπεδα της hCG στα ούρα είναι πολύ υψηλά ώστε το τεστ να μην μπορεί να δώσει ακριβή εκτίμηση του χρόνου που μεσολάβησε από τη σύλληψη.

4 Πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Clearblue με Δείκτη Σύλληψης;
 Μπορείτε να κάνετε το τεστ μέχρι 5 ημέρες πριν από την αναμενόμενη περίοδο σας (δηλαδή 4 ημέρες πριν από την αναμενόμενη περίοδο σας). Εάν κάνετε το τεστ πριν από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας και λάβετε ένα αποτέλεσμα «Όχι Έγκυος», εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης. Βλ. το διάγραμμα παρακάτω για αποτελέσματα από κλινικές μελέτες με πρώιμα δείγματα τεστ εγκυμοσύνης.

Πρώιμοι Έλεγχος	Αριθμός ημερών πριν από την αναμενόμενη περίοδο			
	-1	-2	-3	-4
% του δείγματος εγκύων γυναικών είναι αποτέλεσμα «Έγκυος»	98%	97%	90%	65%

Εάν το αποτέλεσμα είναι «Όχι Έγκυος» και εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα εγκυμοσύνης. Βλ. Ε13.

Για να βρείτε την αναμενόμενη ημέρα έναρξης της περιόδου σας, υπολογίστε τη συνήθη διάρκεια του κύκλου σας μετρήοντας τον αριθμό ημερών από την πρώτη ημέρα της περιόδου σας μέχρι την ημέρα πριν ξεκινήσει η επόμενη περίοδος σας. Εάν έχετε ακανόνιστους κύκλους, λάβετε υπόψη το μεγαλύτερο κύκλο που είχατε τους τελευταίους μήνες πριν από το τεστ.

5 Μπορεί κάποιο φάρμακο ή κάποιες ιατρικές καταστάσεις να επηρεάσουν το αποτέλεσμα;
 • Διαβάζετε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή για οποιοδήποτε φάρμακο λαμβάνετε πριν από τη

διακρίνω τους εφύγρατους. • Τα φάρμακα γονιμότητας που περιέχουν hCG μπορεί να οδηγήσουν σε παραπλανητικά αποτελέσματα (αυτά τα φάρμακα γονιμότητας χορηγούνται με ενέσιμη μορφή και η διαείγνωση του τεστ σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη χορήγησή τους μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς αποτελέσματα «Έγκυος»). • Λοιπές θεραπευτικές αγωγίες (όπως η κηρίκη κλομφιδίνη), τασιόπινα και ορμονικά αντισυλληπτικά (π.χ. αντισυλληπτικό χάπι) δεν επηρεάζουν κατά κανόνα το αποτέλεσμα.

• Εάν έχετε πρόσφατα διακρίνει τη χρήση ορμονικών αντισυλληπτικών ή χρησιμοποιείτε θεραπευτικές γονιμότητας, όπως κηρίκη κλομφιδίνη, ο κύκλος σας μπορεί να παρουσιάσει ανωμαλίες, με αποτέλεσμα να κάνετε το τεστ πιο νωρίς από ό,τι θα έπρεπε. • Εάν υπήρξε πρόσφατα έγκυος (ακόμα και αν δεν ολοκληρώθηκε η κύηση) μπορεί να λάβετε ένα ψευδώς αποτέλεσμα «Έγκυος». • Εάν έχετε μπει ή πρόκειται να μπειτε στην εμμηνορροϊκή, μπορεί να λάβετε ένα ψευδώς αποτέλεσμα «Έγκυος» ακόμα και αν δεν έχετε έγκυος. • Με εξαιρετικά κρύα και οι ιωοβητικές κύστες ενδέχεται να δώσουν παραπλανητικά αποτελέσματα. • Οι πολυπλάτες και οι εκτοπικές εγκυμοσύνες ενδέχεται να δώσουν παραπλανητικά αποτελέσματα Δείκτη Σύλληψης εβδόματων.

Εάν τα αποτελέσματα του τεστ είναι μη αναμενόμενα, θα πρέπει να τα συζητήσετε με το γιατρό σας.

6 Χρησιμοποιήστε το τεστ, αλλά δεν εμφανίστηκε το σύμβολο ανίχνευσης. Τι σημαίνει αυτό;
 Δεν ήταν σωστή η εκτέλεση του τεστ. Βλ. Σφράμιτα τεστ.

7 Χρησιμοποιήστε το τεστ, αλλά δεν εμφανίστηκε κανένα αποτέλεσμα στην οθόνη. Τι σημαίνει αυτό;
 Το αποτέλεσμα θα πρέπει να εμφανιστεί στην οθόνη μέσα σε 3 λεπτά. Εάν δεν εμφανιστεί κανένα αποτέλεσμα, βλ. Σφράμιτα τεστ.

8 Το τεστ μου έδειξε ότι είμαι έγκυος. Τι πρέπει να κάνω;
 Εάν το αποτέλεσμα του τεστ είναι «Έγκυος», θα πρέπει να επισκεφθείτε το γιατρό σας για να σας συμβουλευτεί σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε. Ο Δείκτης Σύλληψης προσφέρει μόνο μια εκτίμηση για το πόσο συλλαβείτε. Ο γιατρός σας θα υπολογίσει το στάδιο της εγκυμοσύνης σας βάσει της πρώτης ημέρας της τελευταίας σας περιόδου. Η σύλληψη συμβαίνει περίπου 2 εβδομάδες πριν την αναμενόμενη ημέρα έναρξης της επόμενης περιόδου σας.

9 Το τεστ μου λέει ότι είμαι έγκυος, αλλά δεν νομίζω ότι συνέβη την περίοδο που μου υποδεικνύει ο Δείκτης Σύλληψης. Είναι δυνατό;
 Ο Δείκτης Σύλληψης είναι 93% ακριβής, όταν το τεστ γίνεται με τα πρώτα πρωίνα ούρα της ημέρας. Ορισμένα φάρμακα ή ορισμένες ιατρικές καταστάσεις ενδέχεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Βλ. Ε5.

10 Έκανα το τεστ χθες και το αποτέλεσμα ήταν «Έγκυος». Ξαφάκανα το τεστ σήμερα, και σύμφωνα με το Δείκτη Σύλληψης, ο αριθμός των εβδομάδων από τότε που συνέβητο έχει μειωθεί. Τι πρέπει να κάνω;
 Τα επίπεδα της hCG παρουσιάζουν διακύμανση καθώς αυτών αυξάνεται και επομένως είναι πιθανό ο Δείκτης Σύλληψης να δώσει μη αναμενόμενα αποτελέσματα εάν κάνετε το τεστ κάθε μέρα για συνεχόμενες ημέρες. Κάντε ξανά το τεστ μέσα σε 5 ημέρες και, εάν τα αποτελέσματα του Δείκτη Σύλληψης δείχνουν ακόμη ότι ο αριθμός των εβδομάδων από τότε που συλλαβείτε έχει μειωθεί, βλ. Ε12.

11 Το προηγούμενο μου τεστ έδειξε «Έγκυος» αλλά ξαφάκανα το τεστ και το αποτέλεσμα ήταν «Όχι Έγκυος», ή ξεκίνησε η περιόδός μου. Τι σημαίνει αυτό;

Ενώ το τεστ έχει ακριβεία μεγαλύτερη από 99% στο να ανιχνεύει την ορμόνη της εγκυμοσύνης στο πρώτο πρωίνα ούρα της επόμενης περιόδου σας, είναι δυνατό να λάβετε αποτέλεσμα «Έγκυος» και να ανακαλύψετε αργότερα ότι δεν είστε έγκυος (δηλ. μπορεί αργότερα να λάβετε αποτέλεσμα «Όχι Έγκυος», ή να ξεκινήσει η περίοδος σας). Αυτό μπορεί να οφείλεται σε φυσική απώλεια κατά τη διάρκεια της πρώιμης σταδίου εγκυμοσύνης, γνωστή ως «πρώιμη απώλεια κύησης», η οποία συστηματικά δεν είναι σπάνια, καθώς περίπου 1 στους 4 εγκυμοσύνες καταλήγουν σε πρώιμη απώλεια κύησης. Εάν τα αποτελέσματα είναι μη αναμενόμενα, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας.

12 Έκανα το τεστ πριν από μία εβδομάδα και το αποτέλεσμα ήταν «Έγκυος». Ξαφάκανα το τεστ, και σύμφωνα με το Δείκτη Σύλληψης, ο αριθμός των εβδομάδων από τότε που συνέβητο έχει μειωθεί. Τι πρέπει να κάνω;
 Εάν κάνατε το τεστ σύμφωνα με τις οδηγίες, με τα πρώτα πρωίνα ούρα της ημέρας και στις δύο περιπτώσεις, και ο Δείκτης Σύλληψης έδωσε μη αναμενόμενα αποτελέσματα, θα πρέπει να επισκεφθείτε το γιατρό σας.

13 Το τεστ μου δείχνει «Όχι Έγκυος». Τι πρέπει να κάνω;
 Μπορεί να μην είστε έγκυος ή τα επίπεδα της ορμόνης της εγκυμοσύνης μπορεί να μην είναι αρκετά υψηλά ώστε να είναι ανιχνεύσιμη ή μπορεί να μην υπολογίζονται σωστά την ημέρα που περιμένετε την επόμενη σας περίοδο.

- Εάν κάνατε το τεστ νωρίς, επαναλάβετε το τεστ την ημέρα που αναμένετε την περίοδο σας.
- Εάν έχει καθυστερήσει η περίοδος σας, επαναλάβετε το τεστ μετά από 3 ημέρες.
- Εάν το αποτέλεσμα του τεστ είναι και πάλι «Όχι Έγκυος» και εξακολουθεί να μην έχετε περίοδο, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Σφράμιτα τεστ

Σφάλμα ενδείξης βιβίου - κάποιο σφάλμα προέκυψε κατά τη διαείγνωση του τεστ. Πιθανόν:

- Να μην κρυσταλλώ το απορροφητικό άκρο προς τα κάτω ή να μην τοποθετήσατε το τεστ σε επίπεδη επιφάνεια μετά την απορρόφηση των ούρων.
- Να απορροφήσετε υπερβολικά ή ελάχιστη ποσότητα ούρων.

Οα πρέπει να επαναλάβετε το τεστ χρησιμοποιώντας ένα νέο τεστ και ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες.

Σφάλμα κενής ενδείξης

Το τεστ δεν λειτουργεί σύμφωνα με τα αναμενόμενα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν ακολουθήσατε τις οδηγίες χρήσης. Οα χρειαστεί να κάνετε ένα άλλο τεστ. Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά.

Απόρριψη του τεστ

Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από την απόρριψη του δοκιμαστικού στικ. Η απόρριψη της μπαταρίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την κατάλληλη μέθοδο ανακύκλωσης. Για να την αφαιρέσετε, εισάγετε ένα νόμισμα στη σχισμή που βρίσκεται στο άκρο και γυρίστε το με τα νύχια ή με ένα ανάστρο για να ανοίξει το πίσω μέρος του δοκιμαστικού στικ. Εάν η μπαταρία δεν είναι ορατή, ολιθώστε προς τα έξω την υποδοχή της μπαταρίας στην κατάσταση του βέλους για ευκολότερη αφαίρεση. Προσοχή! Μην αποσυναρμολογείτε, επαναορμολογήσετε ή πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Πελάστε το υπόλοιπο μέρος του δοκιμαστικού στικ σύμφωνα με την κατάλληλη μέθοδο ανακύκλωσης για ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Μην πετάτε ηλεκτρονικό εξοπλισμό στη φωτιά.

Αυτή η ψηφιακή συσκευή IVD είναι συμβατή με τις απαιτήσεις εκπομπών και ατρωσίας του προτύπου EN 61326-2-6:2008. Το αντισταθιακό μέτρο EMC που χρησιμοποιούνται στο ηλεκτρονικό όργανο θα εξασφαλίζουν εύλογη προστασία από τις επιβλαβείς ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που είναι πιθανό να υπάρχουν στο οικιακό περιβάλλον. Οι ακολουθίες προληπτικής προεπιδοποίησης ισχύουν για εξοπλισμό που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61326-2-6:2008. α) Η χρήση αυτού του οργάνου σε κρηρό περιβάλλον, ιδίως εάν είναι παρόντα συνθηκικά υλικά (συνθετικά ρούχα, χάλια κτλ.) μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν εσφαλμένα αποτελέσματα. β) Μη χρησιμοποιείτε το όργανο κοντά σε άλλες ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες (π.χ. κινητά τηλέφωνα), καθώς αυτές μπορεί να παρεμβληθούν στη σωστή λειτουργία.

www.clearblue.com
 Σύμβουλοι διαθέσιμοι 09:00 - 17:00 Δευ-Παρ, εκτός των αργιών. Η διαείγνωση της κλήσης σας θα γίνεται μέσω μεταφραστή.
210 300 1827 Οι κλήσεις χρωματίζονται με τιμές αστικής κλήσης. Όλες οι κλήσεις καταγράφονται και μπορεί να παρακολουθούνται για σκοπούς ποιότητας. Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας το προϊόν και όλη τη συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των θηκών από φύλλο αλουμινίου, όταν καλέτε.

Διαμονή στην Ελλάδα:
 ΠΡΟΚΕΤ Ρ ΓΚΑΜΠΑ
 ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ
 Αγίου Κωνσταντίνου 49,
 15124 Μαρυσία Αθήνα
 Τηλ: 210 300 1827

Για αυτοέλεγχο στο σπίτι. Μόνο για *in vitro* διαγνώσιμη χρήση. Όχι για εξωτερική χρήση. Μην επαναχρησιμοποιείτε. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεταξύ 2° - 30°C. Αφαιρέστε το τεστ να φθάσει σε θερμοκρασία θωμαίου για 30 λεπτά πριν να το χρησιμοποιήσετε, εάν το είχατε φυλαγμένο στο ψυγείο. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει καταστραφεί το αλουμινένιο περιτύλιγμα. Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης. Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μπαταρίες. Απορριψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Περίεξη μικρά μέρη. Μην καταπιείτε κανένα εξάρτημα αυτής της συσκευής. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, ζητήστε ιατρική φροντίδα. Αναφέρετε τυχόν τραυματισμό που προκλήθηκε από τη χρήση αυτού του προϊόντος στην Clearblue.

	Κατασκευαστής		Μην το επαναχρησιμοποιείτε
	Κωδικός παρτίδας		In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή
	Ημερομηνία λήξης		Όριο θερμοκρασίας 2°C - 30°C